


100% naturalny kolagen
Optymalne gojenie ran
Usieciowana struktura



Biomatlante
Biologics Solutions

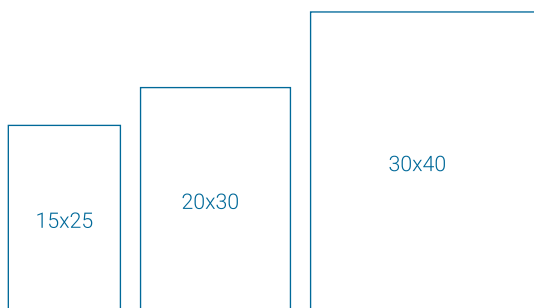

Dostępne w różnych rozmiarach

Kod	Wielkość membrany	Cena brutto
0701EZC1525	RCM 15x25mm	360,00
0901EZC1525	RCM 15x25mm (2 sztuki)	590,00
0702EZC2030	RCM 20x30mm	550,00
0703EZC3040	RCM 30x40mm	670,00

Przeczytaj instrukcję użytkowania, aby uzyskać pełną listę ostrzeżeń, środków ostrożności, możliwych zdarzeń niepożądanych i innych ważnych informacji medycznych.


Bibliografia znajduje na www.biomatlante.com

EZ CURE Membrane

Resorbowalna Membrana Kolagenowa

EZ Cure to wysoko oczyszczona usieciowana membrana z kolagenu wieprzowego.

Skuteczny efekt bariery w procedurach GTR i GBR.

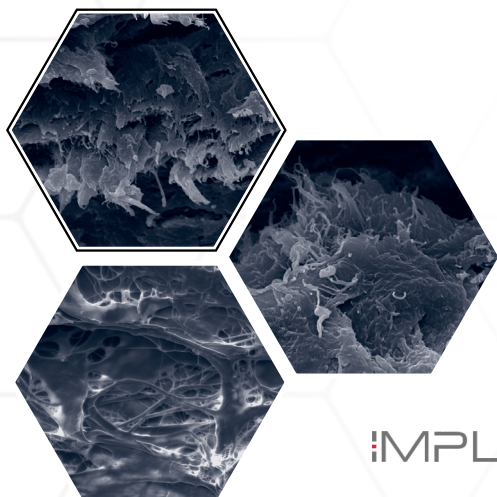

IMPLACORE

Dystrybucja w Polsce:
IMPLACORE Sp. z o. o.
ul. Polska 94a 60-401 Poznań
Tel.+48 61 663 07 86
+48 61 663 07 85
e-mail: info@implacore.pl

Karta danych

EZ Membrane

Resorbowalna Membrana Kolagenowa

Specyfikacje techniczne

Membrana EZ Cure, elastyczna i dająca się przystosować

Pochodzenie	Membrana składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych typu I i III, pochodzących ze świńskiej skóry.
Resorbowalna	Ulega kontrolowanej resorpcji w tkankach w ciągu 24 tygodni.
Funkcja bariery	Usieciowana struktura zapewnia kontrolowany czas resorpcji i funkcję bariery przez 12 tygodni. Skutecznie zapobiega wrastaniu nabłonka i tkanki łącznej
Obustronna	EZ Cure może być umieszczona obustronnie dzięki swojej 3-warstwowej strukturze. Jest bardzo łatwa w użyciu.
Elastyczna i łatwo adaptowalna	EZ Cure ma doskonałe właściwości użytkowe. Jest elastyczna i idealnie dopasowuje się do różnej geometrii kości. Łatwa do cięcia i kształtowania. Można ją przyszywać i pinować.
Adhezyjna	Dzięki unikalnej powierzchni membrana wykazuje doskonałe przyleganie do tkanki.
Sterylizacja	Radiacyjna
Okres przydatności do użycia	3 lata

Biokompatybilna i bezpieczna

Łatwa w użyciu

Zapobiega wrastaniu komórek nabłonkowych i tkanki łącznej

EZ Cure jest resorbowalną membraną z usieciowanego kolagenu, stosowaną w technice sterowanej regeneracji kości. Technika ta wspiera proliferację komórek kościotwórczych w określonym obszarze i zapobiega wrastaniu w tym miejscu komórek nabłonkowych i komórek tkanki łącznej. EZ Cure spełnia rolę błony przez ponad 12 tygodni, pozwalając w tym czasie na właściwy proces regeneracji.

Błona EZ Cure znajduje zastosowanie w procedurach periodontologicznych i chirurgicznych jako materiał aplikowany w okolicy przyzębia, implantów stomatologicznych, ubytków kostnych lub w miejscach rekonstrukcji wyrostka zębodołowego. W procedurach odbudowy kości zaleca się łączenie błony EZ Cure z materiałami osteokondukcyjnymi (oferta materiałów osteokondukcyjnych na stronie www.implacore.pl).

